

Teknik Özellikler

Boyutlar

Genişlik	224 mm
Derinlik	82 mm
Yükseklik	528,5 mm
Mobil Stant Yüksekliği	1008 mm (min.) 1721 mm (maks.)

Özellikler

Ekran	2.5 inç tek renkli LCD
Lamba Tipi	16 adet Mavi Süper LED lamba
Muayene Lambaları	4 adet Beyaz LED lamba
Lamba Ömrü	50,000 saat
Yoğunluk	35 - 110 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (ayarlanabilir 5 seviye)
Cihazın çalışma durumuna göre kullanıcıyı uyararak renkli ledler	Mavi, Yeşil, Kırmızı
Terapi Süresi Ayarlama	1 dk aralıklarla 100 dk'ya kadar.
Fansız çalışma	Havalandırma kanalları sayesinde
Dalgaboyu	440 - 460 nm
Etkili Işınım Alanı	54 x 32 cm
Besleme Gerilimi	100 - 240 VAC
Güç Adaptörü	24VDC, 1,5A

Çevresel Gerekliklikler

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	+20°C - +30°C
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-20°C - +60°C
Çalışma Nemi Aralığı	%5-95 RH, yoğunlaşmaz
Depolama Nemi Aralığı	%5-95 RH, yoğunlaşmaz

Kanıtlanmış kalite ve %100 müşteri memnuniyeti

Sahip olduğumuz sıkı kalite politikası sayesinde %100 müşteri memnuniyetine ulaştık. Novos, yenidoğan bakımı için yüksek kaliteli ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edecektir; sizin yapmanız gereken tek şey hastalarınıza odaklanmak.

NOVOS Medical önceden haber vermeksizin tasarımda, özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. NOVOS Medical Systems'in kalite yönetim sistemi ISO 13485 sertifikasına sahip olup ürünler Tıbbi Cihaz Direktifine (93/42/EEC) göre sertifikalandırılmaktadır.

Sipariş Listesi

Standart Aksesuarlar

Bililed Maxi+
Güç Adaptörü
Göz koruma maskesi / küçük
Göz koruma maskesi / orta
Göz koruma maskesi / büyük
Vantuz
Kullanım Kılavuzu

Opsiyonel

Mobil stant
Göz koruma maskesi / küçük
Göz koruma maskesi / orta
Göz koruma maskesi / büyük

En Kıymetliniz bizimle Güvende

Kanıtlanmış kalite ve %100 müşteri memnuniyeti

Sahip olduğumuz sıkı kalite politikası sayesinde %100 müşteri memnuniyetine ulaştık. Novos, yenidoğan bakımı için yüksek kaliteli ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edecektir; sizin yapmanız gereken tek şey hastalarınıza odaklanmak.

NOVOS Medical önceden haber vermeksizin tasarımda, özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. NOVOS Medical Systems'in kalite yönetim sistemi ISO 13485 sertifikasına sahip olup ürünler Tıbbi Cihaz Direktifine (93/42/EEC) göre sertifikalandırılmaktadır.

Novos Tıbbi Cihazlar Sanayi Ticaret
İthalat ve İhracat Limited Şirketi
İvedik Osb Mah. 1518. Cad. Matbaacılar Sitesi
No: 2/39 Yenimahalle, Ankara, Turkey
Tel: +90 312 384 15 88 Fax: +90 312 384 15 98

Bililed Maxi+

Yüksek Yoğunluklu Fototerapi Cihazı



En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

Novos, 50,000 saat LED ömrüne ve genişletilmiş etkili yüzey alanına sahip yeni bir gelişmiş fototerapi sistemi sunuyor. NOVOS Bililed Maxi+ yüksek yoğunluklu fototerapi, hiperbilirübinemisi olan yenidoğanlar için mükemmel bir tedavi performansına sahiptir.

Optimum Dalgaboyu

BililedMaxi+'da kullanılan Mavi Süper LED'ler 440-460 nm arasında ışık yayar böylece sarılık tedavisi için en etkili dalgaboyu ile bilirubin yıkımı en üst düzeye çıkarılır. (Neonatal hyperbilirubinaemia, A. Ramachandran, Pediatrics And Child Health, 2016).

Muayene Lambası

Güçlü muayene lambaları yenidoğanın tam olarak görülebilmesini sağlar ve vantuzlar yenidoğan küvöz kanopisinin üzerinde stabilizasyon sağlar.



Muayene Lambası

Kullanımı Kolay Tasarım

Bililed Maxi+, çıkarılabilir ve hafif başlık ünitesi ve fonksiyonel mobil stant ile ergonomik bir tasarıma sahiptir.


- Ayarlanabilir başlık
- Kolay hareket eden tekerlekler



KI 1000 ile Bililed Maxi+

Homojen Işık Dağılımı


Bililed Maxi+'daki 16 adet süper LED sayesinde ışık yenidoğanların tam vücut yüzeyi alanı boyunca homojen olarak dağıtılır.

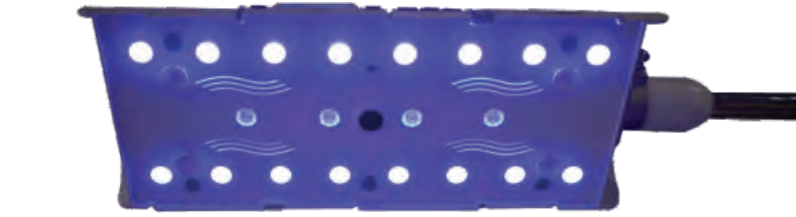

Bililed Maxi+'ın süper LED'leri

Genişletilmiş Etkili Yüzey Alanı

Bililed Maxi+, fiziksel olarak çok aktif yenidoğanların bile tüm vücut yüzeyini kaplayan, geniş bir etkili yüzey alanına sahiptir.



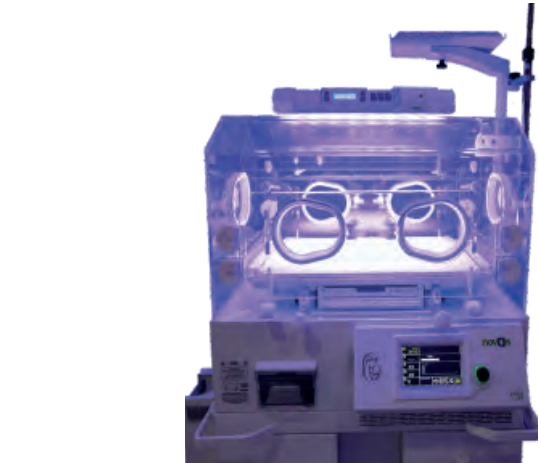


Bililed Maxi+'nın Yüzey Alanı

Ayarlanabilir Işık Yoğunluğuyla Sarılık Tedavisi

Fototerapi tedavisinde ışık yoğunluğu ve toplam bilirubin konsantrasyonundaki azalma oranı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bililed Maxi+ 16 adet süper LED ile 35 cm mesafede 70 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ 'nin üzerinde (5 seviye) ışıma sağlar. Işık yoğunluğu her bir hastanın ihtiyaçlarına göre 5 farklı seviyede ayarlanabilir. (Neonatal hyperbilirubinaemia, A. Ramachandran, Pediatrics And Child Health, 2016.)

Bililed Maxi+'ın Yüzey Alanı

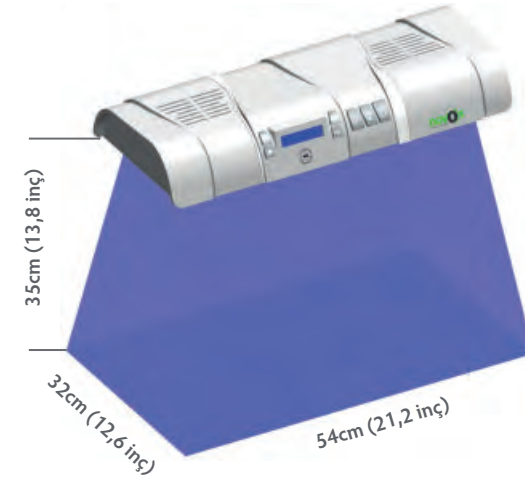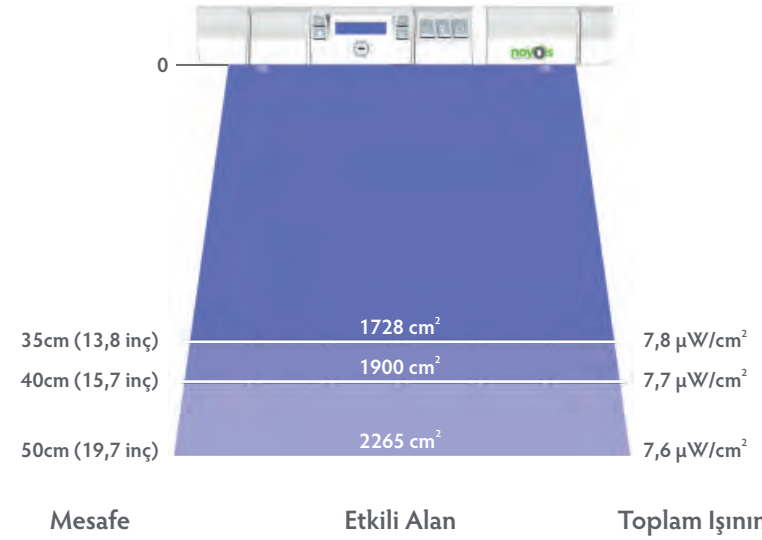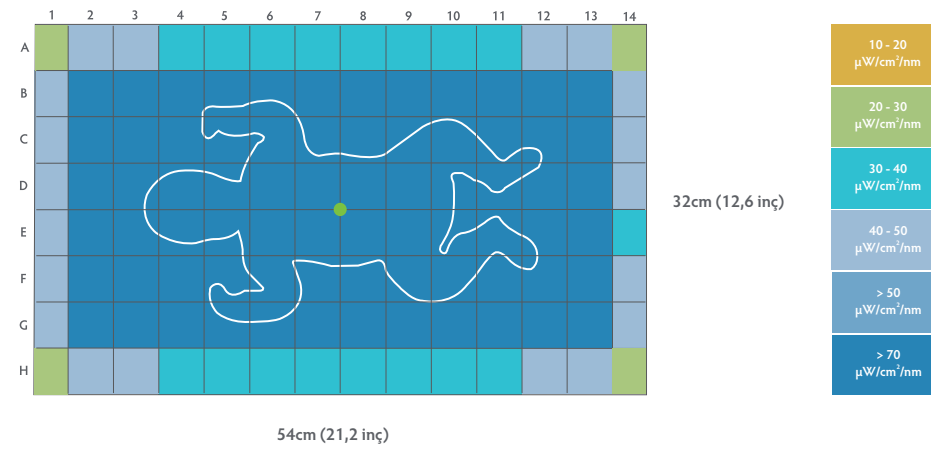

Mobil Stant ile Bililed Maxi+

Hidrolik yükseklik ayarı, frenli tekerlekler, çıkarılabilir ve hafif başlık ünitesi, kullanım sırasında sağlamlık, kolay manevra kabiliyeti ve rahatlık sağlar.



Etkin Maliyetli Işık Teknolojisi

Bililed Maxi+ LED, konvansiyonel floresan tüplerden 25 kat daha uzun, **50,000** saatlik kullanım ömrüne sahiptir. Bililed Maxi+'ta lamba değişim maliyetleri konvansiyonel cihazlara göre belirgin şekilde azaltılmıştır.



2,5 inç tek renkli LED