



Mekanik Özellikler

Su ve katı nesnelere karşı koruma
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Taşıyıcı Yüksekliği
Taşıyıcı Tekerlekleri
Işık Kaynağı Ağırlığı
Taşıma Arabası Ağırlığı

IP20
Cihaz - 82 mm / Taşıma Arabasıyla - 1098 mm
Cihaz - 300 mm / Taşıma Arabasıyla - 834 mm
Cihaz - 168 mm / Taşıma Arabasıyla - 504 mm
1008 - 1719 mm
(Ø50) / toplam 4 tekerlek, 2'si frenli (Ø50)
1,15 kg
15 kg

Elektrik Özellikler

Besleme Gerilimi ve Akım
Sigorta
Besleme Frekansı
Maksimum Güç Tüketimi

100 - 240 VAC, 0.2A AC / 12V DC, 0.7A DC
2A x 1
50 - 60 Hz
30 VA AC / 8,5 W DC

Çevresel Koşullar

Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Depolama Nemi

20°C - 30 °C
%5 - %95 RH, yoğuşmasız
(-20)°C - 60 °C
%5 - %95 RH, yoğuşmasız

Fototerapi LED Özellikleri

LED sayısı
Işık Yoğunluğu
Dalga Boyu
LED Modül Ömrü

4 adet Mavi Power LED
> 40 µW / cm² / nm
440 - 460 nm
50.000 saat

Çeşitli Özellikler

Yazılım Sürümü
Reset LED Modülü Çalışma Süresi
Muayene LED'leri
Muayene Lambası Işık Yoğunluğu Seviyesi
Fototerapi Lambası Işık Yoğunluğu Seviyesi
Taşıyıcı
Odak LED'i
Arayüz Dilleri
Cihazın çalışma durumuna göre kullanıcıyı uyarıcı renkli ledler

V3.2
Mevcut
2 adet beyaz LED
5
5
Mevcut (Yükseklik Ayarlama Özelliği)
Mevcut
Türkçe, İngilizce, Fransızca
Mavi, Yeşil, Kırmızı

Kanıtlanmış kalite ve %100 müşteri memnuniyeti

Sahip olduğumuz sıkı kalite politikası sayesinde %100 müşteri memnuniyetine ulaştık. Novos, yenidoğan bakımı için yüksek kaliteli ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edecektir; sizin yapmanız gereken tek şey hastalarınıza odaklanmak.

NOVOS Medical önceden haber vermeksizin tasarımda, özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOVOS Medical Systems'in kalite yönetim sistemi ISO 13485 sertifikasına sahip olup ürünler Tıbbi Cihaz Direktifine (93/42/EEC) göre sertifikalandırılmaktadır.

Novos Tıbbi Cihazlar Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi
İvedik Osb Mah. 1518. Cad. Matbaacılar Sitesi No: 2/39 Yenimahalle, Ankara, Turkey
Tel: +90 312 384 15 88 Fax: +90 312 384 15 98

YENİ

Bililed Mini+

Başüstü Fototerapi Sistemi



En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

Novos, 4 adet mavi süper LED ışıklı en küçük LED fototerapi ünitesini geliştirdi. Bililed Mini+ ergonomik mobil standı ile yer tasarrufu sağlayan bir tasarıma sahip olup YYBÜ'de yenidoğan küvözleri, ısıtıcılar ve bebek beşikleriyle birlikte kullanılabilir.

Minyatür tasarım, etkili tedavi

Minyatür tasarımına rağmen Bililed Mini+, yenidoğanın tüm vücudunu kapsayan, etkili bir tedavi alanına sahiptir. Aktif ve zamanında doğan yenidoğanlar için bile cilt yüzeyinin tamamına ışın uygulanabilir. Lamba ünitesini yenidoğana en uygun mesafeye yerleştirmeye imkan veren yüksekliği ayarlanabilir başlık ünitesi sayesinde maksimum etkinlik sağlanabilir. Bililed Mini+ 35 cm mesafede $40 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ 'nin üzerinde spektral ışınma sağlar ve bu yoğunluk seviyesi APP* kılavuzlarında belirtilen yoğun fototerapi gereksinimlerini karşılamaktadır.

* Amerikan Pediatri Akademisi yoğun fototerapi ışınımının en az $30 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ olmasını tavsiye eder.

Akıllı yazılım sayesinde kolay kullanım

Novos Mühendisleri kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla Bililed Mini+ için akıllı yazılım geliştirdi. Farklı hasta ihtiyaçlarına göre tek bir düğmeye dokunarak ışık yoğunluğunu 5 farklı seviyeye ayarlayabilirsiniz. Işık odaklama özelliği, yenidoğanın vücuduna en iyi şekilde odaklanarak üniteyi doğru pozisyona getirmenize yardımcı olan önemli bir özelliktir.

Taşıyıcının yüksekliği kolay bir şekilde ayarlanabilir.




Mobil stand dar alanlar için ihtiyacınız olan esnekliği sunar.

Süper LED'ler ile düşük maliyet

En son LED teknolojisiyle tasarlanan Bililed Mini+ daha az ısı üretimi, düşük güç tüketimi, yüksek ışık yoğunluğu ve uzun kullanım ömrü sağlar. Uzun kullanım ömürlü LED modülü toplamda 50,000 saatlik tedavi süresine karşılık gelir. Yüksek yoğunluk, tedavi ve hastanede kalış sürelerini kısaltır.

Hafif, elde taşınabilir, portatif

Bililed Mini+, klinisyenlerin ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılar. Ergonomik tasarımı sayesinde bebek beşikleri, yenidoğan ısıtıcıları veya doğrudan yenidoğan küvöz üzerinde kullanılabilir. Herhangi bir alet kullanmadan üniteyi mobil standından kolayca ayırabilirsiniz ve küvözün üzerine koyabilirsiniz. Mobil stand dar alanlar için ihtiyacınız olan esnekliği sunar.

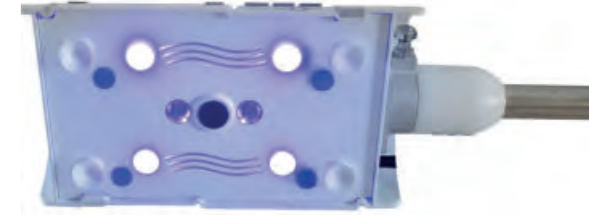

Bililed Mini+, yenidoğan radyant ısıtıcıya monte edilebilir veya mobil stand ile birlikte kullanılabilir.

